


SAFEED®

Biokompatibel dan mudah digunakan

Dikembangkan oleh Terumo, SAFEED® dengan mutu yang tinggi, serta steril. Kateter plastik sekali pakai, dibuat dari damar plastik (polyvinyl chloride) yang menjamin keamanan dengan biokompatibilitas yang tinggi. Komposisi yang unik, mudah penanganannya, disamping memberikan kenyamanan kepada pasien, dimana kelenturannya akan meningkat pada suhu tubuh.

SAFEED® Stomach Kateter

Lentur serta mudah ditelan

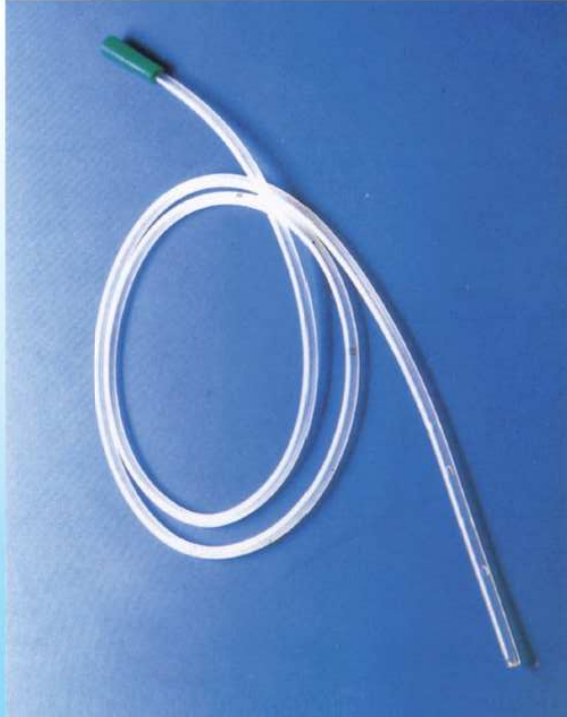

SAFEED stomach kateter dapat diinsersi melalui mulut atau hidung, untuk mengumpulkan cairan lambung, mencuci, menghisap, infus obat-obatan dan untuk drainase setelah operasi. Begitu lentur dan lembut seperti karet memudahkan penelannya. Ideal untuk dipakai di ruang perawatan.

Mengurangi ketidaknyamanan pasien
Kateter transparan, dibuat dari polyvinyl chloride. Karena materi ini sensitif terhadap panas, maka kelenturannya akan meningkat pada suhu tubuh, kompatibel dengan jaringan tubuh, sehingga dapat mengurangi ketidaknyamanan pasien.

Pipa ber dinding tipis mengurangi hambatan



Kateter ber dinding tipis, dengan diameter dalam yang besar, memungkinkan pengaliran yang lancar. Peir-

mukaan dalam yang sangat halus dilengkapi dengan 4 lubang disisi, serta 1 lubang diujung distal.

Adaptor yang sesuai

Lubang pada ujung pipa sesuai dengan kateter taper adaptor dan mudah dihubungkan dengan alat suntik. Pada pipa jelas tertera garis-garis tanda pada 45, 55, 65 dan 75 cm, dari distal untuk mengetahui ketepatan ujung distal yang berada dalam tubuh.



SAFEED® Stomach Kateter sekali pakai


Konsistensi	Lentur
Panjang	125 cm
Ujung distal	Ujung distal terbuka
Konektor	Kateter taper adaptor
Ukuran (French)	12 SF * GT1210 14 SF * GT1410 16 SF * GT1610 18 SF * GT1810

* Semua kateter bergaris tertera 45, 55, 65, dan 75 cm dari ujung distal
* Isi dalam karton = 50 kateter
Bila akan disimpan dalam jangka waktu lama, kateter hendaknya dipanaskan sedikitnya seminggu sekali.
* Juga tersedia dalam bentuk lumen rangkap.

SAFEED® Kateter Plastik Sekali Pakai

SAFEED® Feeding Tube

Lima jenis pilihan

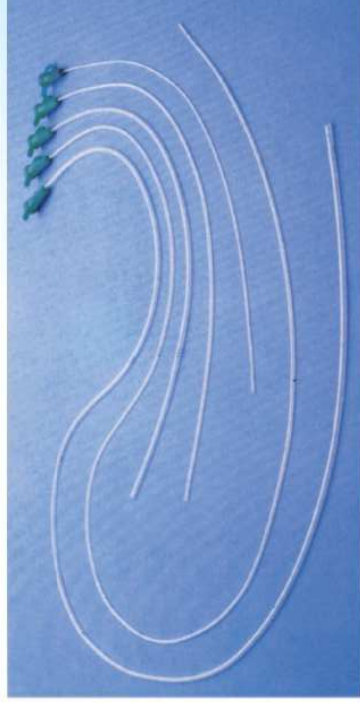

SAFEED Feeding Tube dirancang sebagai alat untuk memberi makanan dengan memasukkannya kedalam lambung melalui hidung. Tersedia 5 jenis kateter (French size 3,5 – 8) yang sesuai bila digunakan sebagai alat pemberian zat makanan kepada berbagai kondisi pasien, dari bayi premature sampai pasien dewasa yang tidak dapat makan melalui mulut.

Adaptor dengan penutup

Adaptor dibuat dari materi yang lentur, dapat dihubungkan dengan alat pemberi makanan dengan aman. Dilengkapi kap penutup guna menghindari aliran balik.

Mengurangi ketidaknyamanan pasien selama pemakaian
Kateter dibuat transparan dari polyvinyl chloride, materi ini tidak berbau dan sensitive terhadap panas, sehingga kelenturan meningkat terhadap suhu tubuh, serta mengurangi ketidaknyamanan pasien.

Inseri yang lancar



Ujung distal kateter tertutup, dibuat sedemikian halus serta mempunyai 2 lubang disisi memudahkan inserisinya serta mengurangi rasa tidak nyaman pada pasien. Pipa ber dinding tipis dengan diameter dalam yang besar melancarkan pemberian makanan. Pipa mempunyai garis tanda yang jelas, memudahkan untuk mengetahui posisi distal didalam tubuh.

SAFEED® Feeding Kateter sekali pakai

Konsistensi	Keras
Lubang	2 buah sisi
Konektor	Adaptor dengan kap
Panjang	35 cm 40 cm 100cm
Ukuran	3,5 (diameter luar SF*FT 1,2 mm) 0380 SF*FT 0580 0585 5 (diameter luar SF*FT 1,7 mm) SF*FT 0880 0885 8 (diameter luar SF*FT 2,7 mm)

* Pada semua kateter tertera angka 20 cm, untuk kateter yang panjang 35 cm dan 40 cm, dan 25, 50 dan 75 cm untuk yang panjang 100 cm dikur dari ujung distal.

* Isi 1 karton = 50 kateter
Bila disimpan dalam waktu lama, kateter harus dipanaskan satu minggu sekali.

SAFEED® Extension Tube



SAFEED® Extension Tubes dapat dihubungkan dengan 3-way-stop-cock, juga dapat digunakan untuk pemberian obat dengan menggunakan syringe pump.

Available sizes

Item code	Tip	Capacity	Tubing length	Inner diameter	Outer diameter
SF*ET2527	Luer	2.5ml	75cm	1,1mm	2,6mm
SF*ET152EL22	Luer lock	1,5ml	150cm	1,1mm	2,6mm

Tubing material: PVC Sterilization: EOG Unit (pcs.): Unit box: 50 pcs. Unit (pcs.): Shipping carton : 400 pcs



PT. TERUMO INDONESIA
 Wisma Kejai 5th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.3, Jakarta 10220
 Phone: (021) 572 4071 (Hunting), Fax: (021) 572 4072
 Email: terumo_indonesia@terumo.co.jp

Distributor: PT. MENSA BINASUKSES
 Jl. Pulo Kambing II/26, Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta 13260
 Phone: (021) 460 1950

Cabang-cabang:

Jakarta MDD (021) 4605462, 46826662, 46825898	Medang (0341) 805948, 805949	Samarinda (0541) 7031503
Tangerang (021) 5392263, 5392264	Denpasar (0361) 222536, 245637, 249304	Manado (0431) 871928
Bandung (0251) 8656888, 8657888	Lampung (0721) 266028	Padang (0751) 7050431, 7054344
Cirebon (0231) 220461	Palembang (0711) 421950, 421951	Pontianak (0561) 7051928
Yogyakarta (0274) 488338, 488457, 488483	Jambi (0741) 7554088, 7554079	Papua (0967) 521315, 590870
Semarang (024) 7626140, 7625940, 7626143, 7620624-25	Pekabaru (0761) 7875510	Batam (0778) 7482217, 7482221
Solo (0271) 666770, 661132	Medan (0411) 424055, 444738	Banda Aceh (0651) 21202, 21203
Surabaya (031) 5914456	Makassar (0411) 3364922, 3364911	



SAFEED® Kateter Plastik Sekali Pakai

Kateter plastik bermutu tinggi
 biokompatibel dan mudah digunakan

